

PURELAB® Dispenser

Lückenlose Unterstützung für die Forschung



Bewährte Zuverlässigkeit

Einzigartiges Design für beispiellose Wasserreinheit, Flexibilität und mühelose Bedienung. In Verbindung mit PURELAB® Chorus und Quest bietet der PURELAB® Dispenser lückenlose Unterstützung für Ihre Forschungsarbeit.



Präzision:

Flexibles Dispensieren mit beispiellosem integriertem Reinheitsüberwachungssensor

- Nachweis über die Wasserreinheit
- Wiederholte Mengendosierung
- Steigerung der Effizienz im Labor
- Reproduzierbare Ergebnisse

Platzsparendes Design:

- Optimale Raumnutzung
- Optimierung des Lagerplatzes
- Bis zu 4 Dispenser pro Wasseraufbereiter*

*Abhängig vom erworbenen Wasseraufbereiter.

Maximale Flexibilität



Einfache Bedienung und Wartung:

- Plug-and-Play-Installation mit PURELAB®-Systemreihe
- Höhenverstellbar, um 180° schwenkbarer Arm und flexibler Dispenser-Arm
- Dispenser-Handgerät mit Menü-Navigation; Schutzklasse IPX7
- Optionaler Anschluss an Point-of-Use-Filtrationssystem

Effizient

- Anpassbare Abgabegeschwindigkeit: von einer präzisen Tropfenabgabe bis zum Dispensieren von 2 Litern pro Minute, einschließlich Kalibrierung.
- Variable Fließrate zum leichteren Füllen verschiedener Laborgefäße.
- Volumetrische Abgabe: Sie können weiterarbeiten, während Wasser dispensiert wird.
- Profilentnahme und festgelegte Abgabemengen ermöglichen die Auswahl der gewünschten Wassermenge und verhindern versehentliches Überlaufen.

Produktspezifikationen

Höhe
580 mm

Tiefe
375 mm

Breite
264 mm


Intuitives Dispenser-Handgerät

Mehrere Dispenser-Optionen

Point-of-Use-Filter

Taste für Höheneinstellung

Flexibler Dispenser-Arm

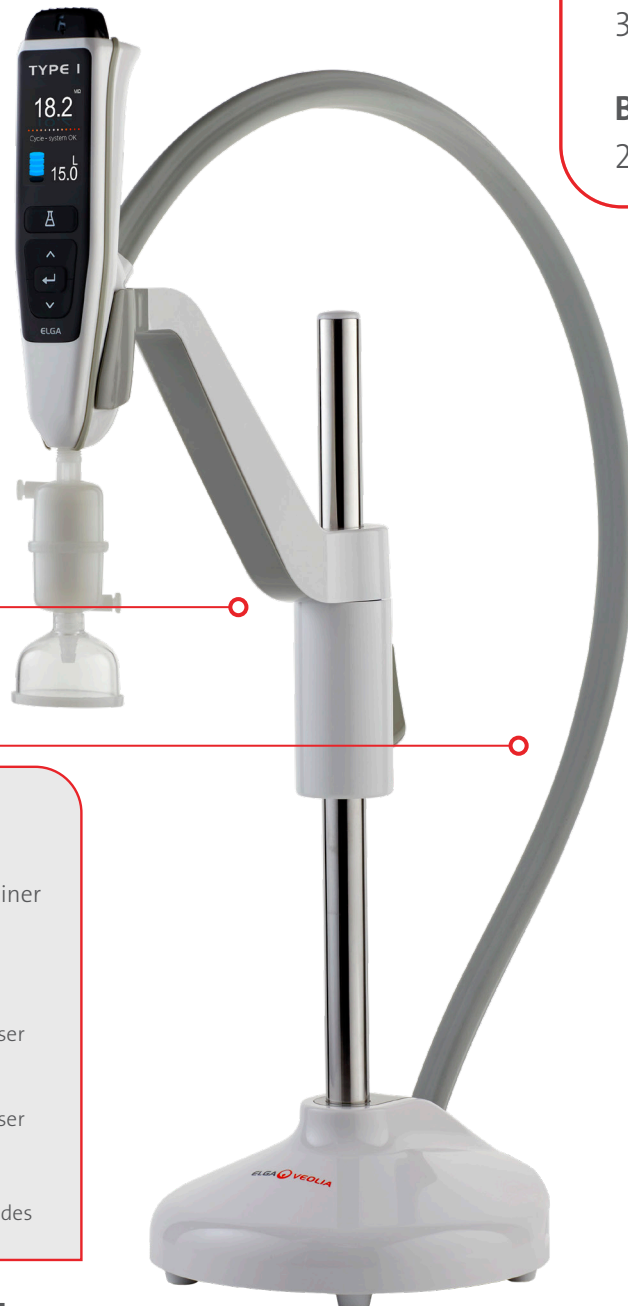

Gewicht bei Lieferung: 7,7 kg

Betriebsgewicht: 4,5 kg

Installation: Der Dispenser wird entweder frei aufgestellt oder mit einer optionalen Halterung auf einer Arbeitsplatte befestigt.

(Details siehe Kurzanleitung)

Stromversorgung

100–240 V AC, 50–60 Hz

Erforderliche Leistung

24 V DC

Leistungsaufnahme

120 VA

Geräuschpegel

dBA - < 40

Einlass

Schlauch, 8 mm
Außendurchmesser

Rücklauf

Schlauch, 8 mm
Außendurchmesser

Durchflussbögen

8 mm
(im Basis-
installationssatz des
Hauptprodukts)

Der Spezialist für die Forschung

ELGA ist der weltweite Spezialist für Innovation, Entwicklung, Service und Support von Wasseraufbereitungssystemen.

Beispiellose Produktdesigns wurden durch internationale Auszeichnungen anerkannt.

Weltweite technische Serviceteams unterstützen Wissenschaftler und Gesundheitswesen rund um den Globus. Experten für Wasseraufbereitung teilen ihr fundiertes Knowhow im Bereich der Analytik.

Die digitale Hubgrade-Plattform von ELGA überwacht die Geräteleistung, damit Labore unterbrechungsfrei arbeiten können.

Dank einer weltweiten Lieferkette erhalten Kunden Support aus regionalen Zentren auf jedem Kontinent.

ELGA gehört zur Veolia-Gruppe, dem weltweit größten Anbieter von Dienstleistungen im Bereich Wasser-, Entsorgungs- und Ressourcenmanagement.

info@elgalabwater.com / www.elgalabwater.com

Finden Sie Ihre nächstgelegene ELGA-Vertretung unter www.elgalabwater.com und wählen Sie das jeweilige Land, um die entsprechenden Kontaktdaten anzuzeigen.

Elga Global Operations Centre.

Tel.: +44 (0) 203 567 7300

fax: +44 (0) 203 567 7205