

PURELAB® Dispenser

Descubrimiento ininterrumpido



Fiabilidad comprobada

Pureza sin parangón en el diseño, flexibilidad sin igual y uso fácil. Junto con PURELAB® Chorus y Quest, el dispensador PURELAB® ofrece un descubrimiento ininterrumpido.



Exactitud:

Dispensación flexible con un sensor de control de pureza sin igual integrado

- Ofrece una prueba de la pureza del agua
- Dispensación de volumen repetida
- Aumenta la eficiencia del laboratorio
- Resultados reproducibles

Ocupación optimizada:

- Maximiza el espacio del laboratorio
- Optimización del espacio de almacenamiento
- Hasta cuatro dispensadores por purificador de agua*

*Depende del purificador de agua adquirido.

Máxima flexibilidad



Uso y mantenimiento sencillos:

- Instalación Plug and Play con la gama PURELAB®
- Altura ajustable, brazo giratorio de 180° y brazo dispensador flexible
- Mando dispensador clasificado IPX7 con navegación por menú
- Conexión opcional a la filtración en el punto de uso

Eficiente

- Desde un gota a gota preciso hasta 2 l por minuto, lo que permite la velocidad correcta, incluido el trabajo de calibración
- Caudal variable para facilitar el llenado de recipientes de laboratorio de diferentes tamaños
- Dispensación volumétrica que le libera para seguir trabajando mientras se dispensa el agua
- Dispensación por perfil y dispensación bloqueada que le permiten elegir la cantidad de agua deseada y evitar inundaciones accidentales

Especificaciones del producto

Altura
580 mm

Profundidad
375 mm

Anchura
264 mm


Mando intuitivo del dispensador

Varias opciones de dispensación

Filtro en el punto de uso

Botón de ajuste de altura

Brazo de dispensación flexible

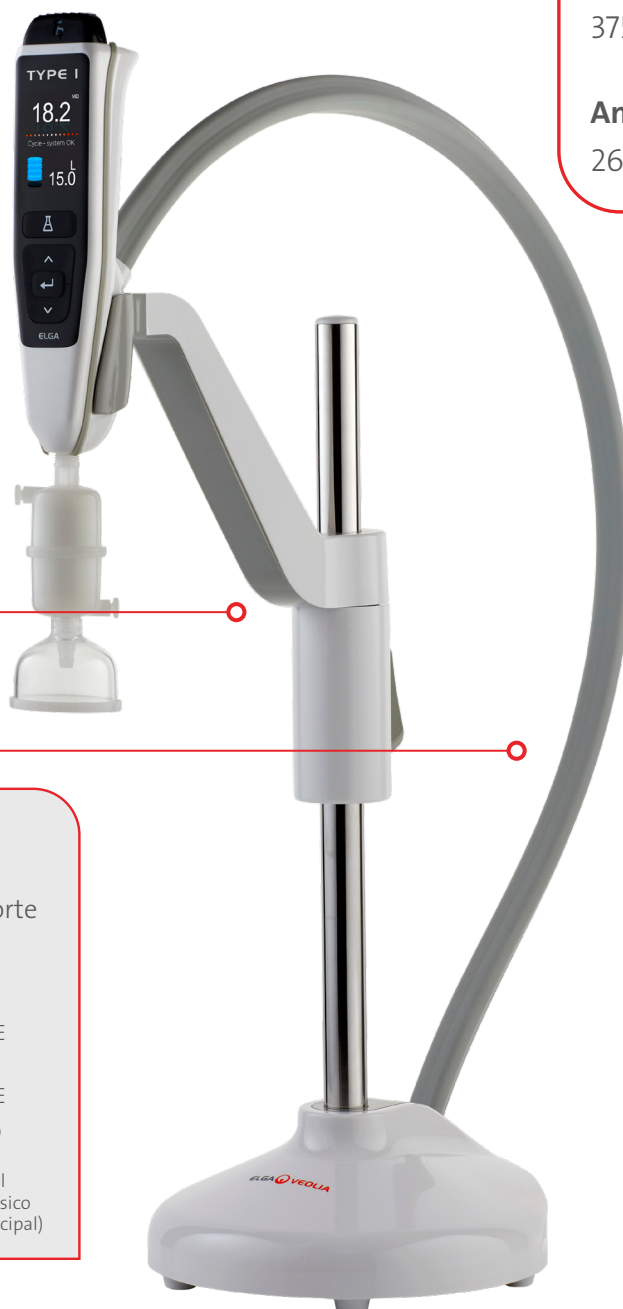

Peso de envío: 7,7 kg

Peso operativo: 4,5 kg

Instalación: El dispensador es independiente o se puede fijar a una encimera utilizando un soporte de montaje opcional.

(Encontrará los detalles en la guía de inicio rápido)

Entrada de red

100-240 V CA, 50-60 Hz

Potencia necesaria

24 V CC

Consumo eléctrico

120 VA

Emisión de ruido

dBA - < 40

Entrada

Tubo de 8 mm DE

Retorno

Tubo de 8 mm DE

Codos de flujo

8 mm

(se proporciona en el kit de instalación básico con el producto principal)

Dedicado al descubrimiento

ELGA es el especialista mundial en innovación, ingeniería, servicio y asistencia de sistemas de purificación de agua.

Los diseños de productos inigualables han logrado reconocimiento y premios internacionales.

Los equipos de servicio técnico de todo el mundo apoyan la ciencia y la atención médica a nivel global. Los expertos en tratamiento de agua proporcionan comprensión profunda de las técnicas analíticas.

Hubgrade, la plataforma digital de ELGA, supervisa el rendimiento de los equipos para garantizar que el trabajo de laboratorio continúe sin interrupciones.

La cadena de suministro global da servicio a los clientes desde centros regionales en todos los continentes.

ELGA forma parte de Veolia, la mayor organización de gestión medioambiental del mundo.

info@elgalabwater.com / www.elgalabwater.com

Para encontrar su representante de ELGA más cercano, entre en www.elgalabwater.com y seleccione su país para obtener los datos de contacto.

Centro de operaciones internacional de Elga.

Tel.: +44 (0) 203 567 7300

Fax: +44 (0) 203 567 7205