

PURELAB® Dispenser

Repousser les limites de la recherche



Une fiabilité éprouvée

Pureté de conception sans pareille, polyvalence exceptionnelle et utilisation conviviale. Combiné aux systèmes PURELAB® Chorus et Quest, le distributeur PURELAB® permet de repousser les limites de la recherche.



Précision :

Distribution flexible avec un capteur de contrôle de pureté intégré inégalé

- Permet de prouver la pureté de l'eau
- Distribution de volume répétée
- Efficacité améliorée au sein des laboratoires
- Résultats reproductibles

Faible encombrement :

- Espace maximisé dans le laboratoire
- Optimisation de l'espace de stockage
- Jusqu'à 4 distributeurs par purificateur d'eau*

*Selon le purificateur d'eau acheté.

Flexibilité optimale



Simplicité d'utilisation et d'entretien :

- Installation plug-and-play avec la gamme PURELAB®
- Hauteur réglable, bras rotatif à 180° et bras distributeur flexible
- Dispositif de contrôle de distribution classé IPX7 avec navigation par menus
- Raccordement à un filtre au point d'utilisation (en option)

Efficacité

- Choix de la vitesse adaptée (y compris pour l'étalonnage), du goutte-à-goutte précis jusqu'à 2 litres par minute
- Débit variable pour faciliter le remplissage de récipients de laboratoire de différentes tailles.
- Distribution volumétrique vous permettant de continuer à travailler pendant la distribution d'eau
- Profil de distribution et distribution verrouillée vous permettant de choisir la quantité d'eau souhaitée et d'éviter les inondations accidentelles

Spécifications du produit

Dispositif de contrôle de distribution intuitif

Différentes options de distribution

Filtre au point d'utilisation


Bouton de réglage de la hauteur

Bras de distributeur flexible

Hauteur
580 mm

Profondeur
375 mm

Largeur
264 mm

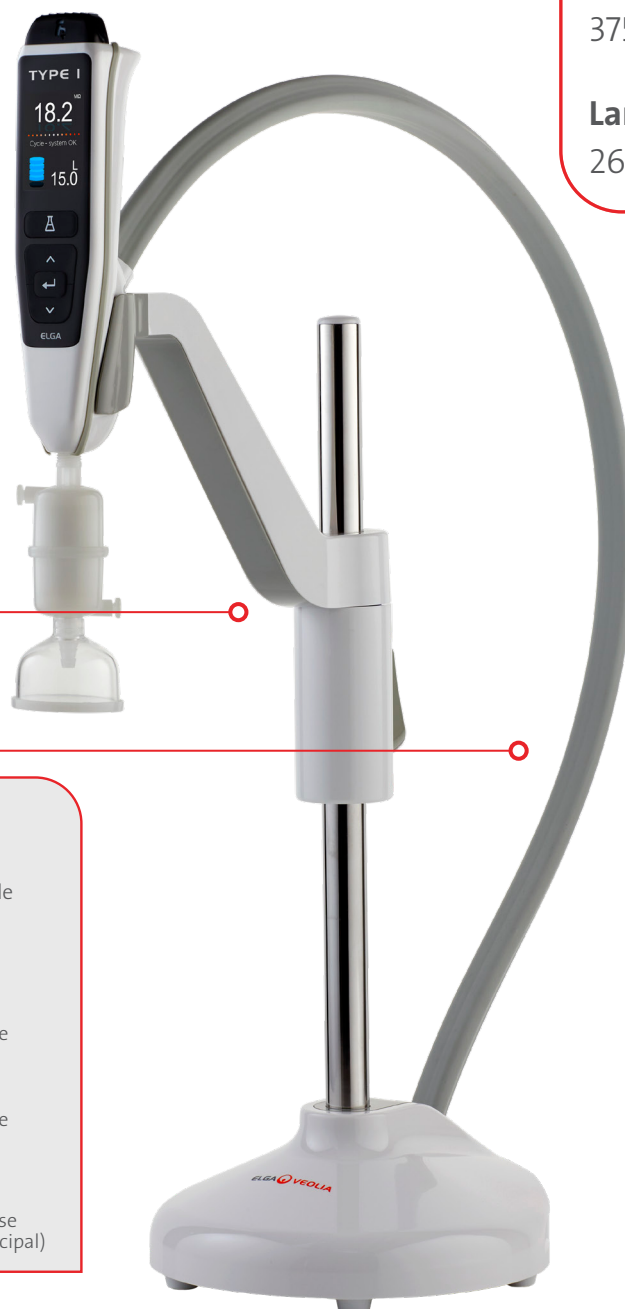

Poids à l'expédition : 7,7 kg

Poids en fonctionnement : 4,5 kg

Installation : Le distributeur peut être installé en mode autonome ou fixé à un plan de travail à l'aide d'un support de montage en option.

(Voir le guide de démarrage rapide pour plus d'informations.)

Entrée secteur

100-240 VCA, 50-60 Hz

Alimentation requise

24 VCC

Consommation d'énergie

120 VA

Niveau sonore

dBA - < 40

Entrée

Tube de 8 mm de diamètre externe

Retour

Tube de 8 mm de diamètre externe

Coudes

8 mm (fournis dans le kit d'installation de base avec le produit principal)

Dedicated to Discovery

ELGA est le spécialiste mondial de l'innovation, de l'ingénierie, de la maintenance et de l'assistance technique pour les systèmes de purification de l'eau.

Nos conceptions de produits novatrices ont été reconnues et récompensées à travers le monde.

Nos équipes d'assistance technique soutiennent la science et les soins de santé dans le monde entier. Grâce à nos experts en traitement de l'eau, nous comprenons parfaitement les techniques d'analyse.

Hubgrade, la plateforme numérique d'ELGA, surveille les performances des équipements pour garantir que les travaux de laboratoire se poursuivent sans interruption.

Une chaîne d'approvisionnement mondiale au service de ses clients, via des centres régionaux dans le monde entier.

ELGA fait partie intégrante de Veolia, la plus grande organisation de gestion environnementale au monde.

info@elgalabwater.com / www.elgalabwater.com

Pour trouver le représentant ELGA le plus proche, rendez-vous sur www.elgalabwater.com et sélectionnez votre pays pour obtenir les coordonnées appropriées.

Elga Global Operations Centre.

Tél. : +44 (0) 203 567 7300

Fax : +44 (0) 203 567 7205