

PURELAB® Dispenser

Ricerca ininterrotta



Comprovata affidabilità

Purezza senza pari nel design, flessibilità ineguagliabile e facilità d'uso. Insieme a PURELAB® Chorus e Quest, l'erogatore PURELAB® consente un lavoro di ricerca ininterrotto.



Precisione:

Erogazione flessibile con sensore integrato di controllo della purezza senza confronto

- Offre prova della purezza dell'acqua
- Erogazione di volumi ripetuti
- Miglioramento dell'efficienza del laboratorio
- Risultati riproducibili

Ingombro ridotto:

- Spazio di laboratorio massimizzato
- Ottimizzazione dello spazio di stoccaggio
- Fino a 4 erogatori per depuratore d'acqua*

*Dipende dal depuratore d'acqua acquistato.

Massima flessibilità



Semplicità d'uso e manutenzione:

- Installazione Plug and Play con la gamma PURELAB®
- Altezza regolabile, braccio rotante 180° e braccio erogatore flessibile
- Erogatore manuale con classificazione IPX7 e navigazione nel menu
- Collegamento opzionale alla filtrazione nel punto di utilizzo

Efficiente

- Da una regolazione precisa goccia a goccia fino a 2 litri al minuto, consentendo di ottenere la giusta velocità, comprese le operazioni di calibrazione
- Portata variabile per facilitare il riempimento di articoli da laboratorio di diverse dimensioni
- Erogazione volumetrica che consente di continuare a lavorare durante l'erogazione dell'acqua
- Erogazione per profilo e erogazione bloccata che consente di scegliere la quantità d'acqua desiderata e di evitare allagamenti accidentali

Specifiche del prodotto

Erogatore manuale intuitivo

Più opzioni di erogazione

Filtri per il punto di utilizzo


Pulsante regolabile in altezza

Braccio di erogazione flessibile

Altezza
580 mm

Profondità
375 mm

Larghezza
264 mm

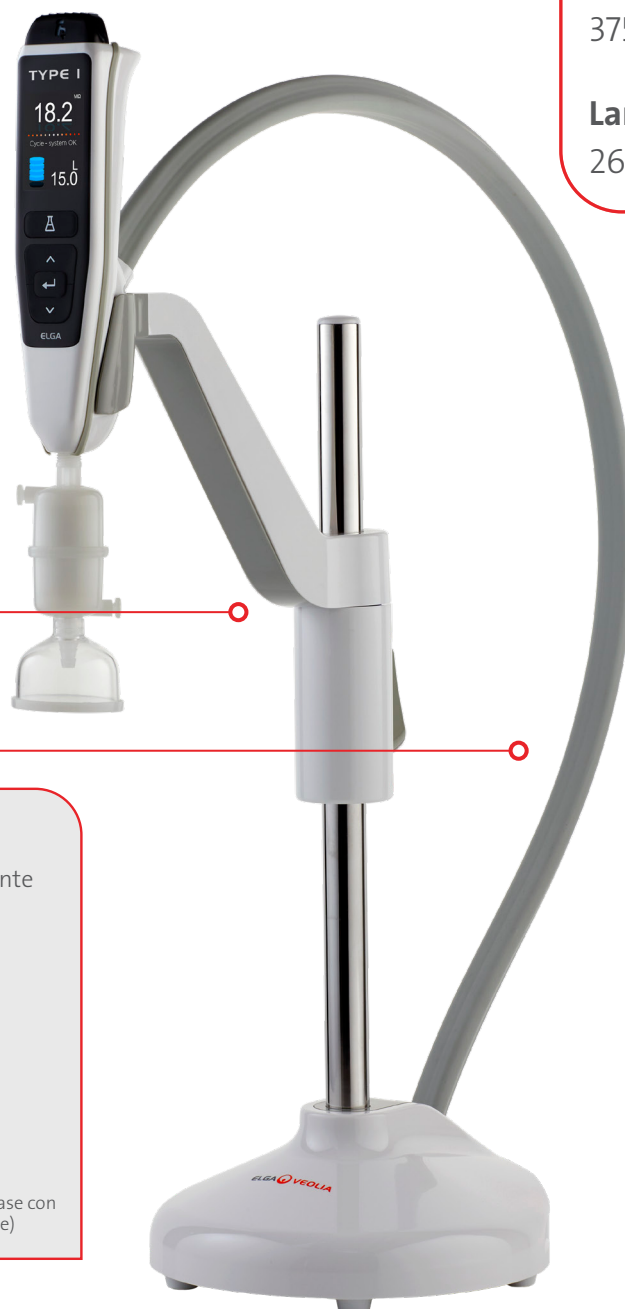

Peso della spedizione: 7,7 kg

Peso operativo: 4,5 kg

Installazione: L'erogatore può essere fissato liberamente o fissato a un piano di lavoro mediante una staffa di montaggio opzionale.

(Per maggiori dettagli vedere la guida di avvio rapido)

Ingresso di rete

100-240 V CA, 50-60 Hz

Potenza richiesta

24V CC

Consumo di energia

120 VA

Rumore generato

dBA - < 40

Ingresso

Tubo OD 8 mm

Ritorno

Tubo OD 8 mm

Gomiti

8 mm

(a corredo nel kit di installazione di base con il prodotto principale)

Dedicato alle scoperte

ELGA è lo specialista mondiale nella progettazione, nell'assistenza e nel supporto di sistemi di depurazione dell'acqua.

Il design impareggiabile dei prodotti ha ottenuto premi e riconoscimenti internazionali.

I team di assistenza tecnica in tutto il mondo supportano la scienza e l'assistenza sanitaria a livello globale. Gli esperti di trattamento delle acque forniscono una conoscenza approfondita delle tecniche analitiche.

Hubgrade, la piattaforma digitale di ELGA, monitora le prestazioni delle apparecchiature per garantire che il lavoro di laboratorio continui ininterrottamente.

Una supply chain globale supporta i clienti dai centri regionali di ogni continente.

ELGA è parte di Veolia, la più grande organizzazione mondiale di gestione ambientale.

info@elgalabwater.com / www.elgalabwater.com

Per trovare i rappresentanti ELGA più vicini a te, vai su www.elgalabwater.com e seleziona il tuo Paese per i contatti.

Elga Global Operations Centre.

tel.: +44 (0) 203 567 7300

Fax: +44 (0) 203 567 7205