

PURELAB® Dispenser

Descoberta ininterrupta



Fiabilidade comprovada

Pureza inigualável na conceção, flexibilidade incomparável e utilização sem esforço. Juntamente com o PURELAB® Chorus & Quest, o PURELAB® Dispenser proporciona uma descoberta ininterrupta.



Exatidão:

Dispensação flexível com sensor de monitorização de pureza integrado inigualável

- Fornecimento de prova da pureza da água
- Dispensação repetida de volumes
- Melhoria da eficiência do laboratório
- Resultados reproduzíveis

Área ocupada reduzida:

- Espaço de laboratório maximizado
- Otimização do espaço de armazenamento
- Até 4 dispensadores por purificador de água*

*Dependente do purificador de água adquirido.

Flexibilidade máxima



Utilização e manutenção simples:

- Instalação Plug and Play com a gama PURELAB®
- Braço ajustável em altura, com rotação de 180° e braço dispensador flexível
- Manípulo do dispensador com classificação IPX7 e navegação por menu
- Ligação opcional a filtragem no ponto de utilização

Eficiente

- Desde gota a gota com precisão até 2 litros por minuto, permitindo a velocidade certa, incluindo trabalhos de calibração
- Caudal variável para facilitar o enchimento de diferentes tamanhos de material de laboratório
- Dispensação volumétrica, libertando-o para continuar a trabalhar enquanto a água é dispensada
- Dispensação por perfil e bloqueada, permitindo-lhe escolher a quantidade de água desejada e evitar inundações acidentais

Especificações do produto

Manípulo intuitivo do dispensador

Múltiplas opções de dispensação

Filtro de ponto de uso

Botão de ajuste de altura

Braço de dispensação flexível

Altura


580 mm

Profundidade

375 mm

Largura

264 mm

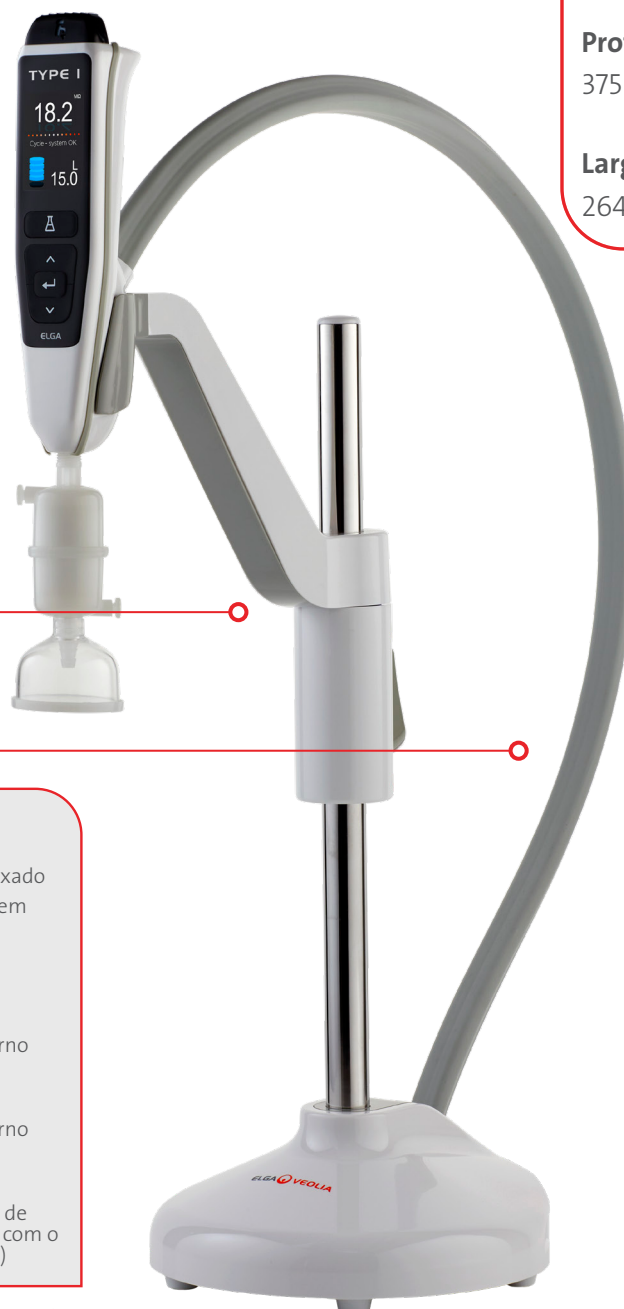

Peso de expedição: 7,7 kg

Peso operacional: 4,5 kg

Instalação: o dispensador é de instalação livre ou pode ser fixado a uma bancada de trabalho, usando um suporte de montagem em bancada de trabalho opcional.
(Consulte o guia de início rápido para obter detalhes)

Entrada da rede

100–240 VCA, 50–60 Hz

Potência necessária

24 V CC

Consumo de potência

120 VA

Emissão de ruído

dBA – <40

Entrada

Tubo de 8 mm de diâmetro externo

Retorno

Tubo de 8 mm de diâmetro externo

Curvas de fluxo

8 mm
(fornecidas no kit de instalação básico com o produto principal)

Dedicados à descoberta

A ELGA é a especialista mundial na inovação, engenharia, assistência e suporte de sistemas de purificação de água.

Os designs de produtos inigualáveis alcançaram reconhecimento e prêmios internacionais.

As equipas de assistência técnica em todo o mundo apoiam a ciência e os cuidados de saúde globalmente. Os especialistas no tratamento de água fornecem uma compreensão aprofundada das técnicas analíticas. O Hubgrade, a plataforma digital da ELGA, monitoriza o desempenho do equipamento para garantir que o trabalho de laboratório continue sem interrupções.

Uma cadeia de abastecimento global apoia os clientes a partir de centros regionais em todos os continentes.

A ELGA faz parte da Veolia, a maior organização de gestão ambiental do mundo.

info@elgalabwater.com / www.elgalabwater.com

Para encontrar o representante ELGA mais próximo, acesse www.elgalabwater.com e selecione o seu país para obter os dados de contacto.

Centro de operações globais da Elga.

Tel.: +44 (0) 203 567 7300

Fax: +44 (0) 203 567 7205